




MANUAL DE USO – Pulsioxímetro WELLUE

Instituto Medicina del Sueño - *Servicio Enfermería*

1. Entrar en la tienda de aplicaciones de su móvil (PLAY STORE para Android o APP STORE para iPhone) para buscar, descargar y abrir la Aplicación VIHEALTH:

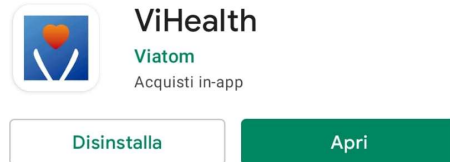

2. Posicionar el dedo índice en el pulsioxímetro y presionar el botón circular con el clásico símbolo de encendido (POWER/ON) para comenzar la medición.



3. Espera 1' y apunta los valores que se muestran en vigilia de forma que los recuerdes al día siguiente. Asegúrate de que tienes la conectividad por Bluetooth activada en tu móvil y agrega el dispositivo de nombre (FS20F) a través de Bluetooth desde la App.
4. Una vez reconocido y sincronizado, el resultado de la medición se debe leer directamente desde la pantalla al cabo de 10 segundos, tal y como se muestra:





- Antes de iniciar el registro, fija bien el pulsioxímetro a tu dedo ayudándote si es necesario de esparadrapo para evitar su pérdida o desconexión durante la prueba. Elige el mismo dedo para todas las noches en las que tengas que usar el pulsioxímetro.
- Es muy importante que, antes de acostarse, haga una prueba de registro de 10', para probar la compatibilidad del dispositivo con su teléfono y, en caso contrario, poder usar otro móvil que no genere problemas. Debe dejar su teléfono enchufado, con el Bluetooth activado y en un modo en el que la pantalla quede iluminada o activa (recomendamos que lo coloque boca abajo), para evitar molestia visual pero de forma que, al mismo tiempo, no se pierda la conexión con el dispositivo y, con ello, la pérdida de datos
- Al final de la grabación, hay que asegurarse de abrir la app en su móvil visualizando el registro y retirar el dedo. Esperar 5 segundos, el dispositivo grabará automáticamente en el móvil el registro. (visible en el apartado "History"). Para mayor seguridad, se recomienda 'Compartir' (la imagen resumen enviándola por WhatsApp al +34644199883, por cada noche de uso del dispositivo, a través del icono de Exportar/Compartir que se muestra en el ángulo superior derecho de la pantalla.



- El oxímetro se convertirá en modo de reposo en 8 segundos automáticamente después de haber retirado el dedo.
- En caso de dudas o problemas sobre el dispositivo, rogamos escribir a enfermeria@dormirbien.info facilitando datos de contacto. Para resto de dudas o asuntos médicos, llamar al 807464165*.



* El precio máximo por minuto de esta llamada es de 1 euro y 21 céntimos de euro si llama desde un teléfono fijo y de 1 euro y 57 céntimos de euro si llama desde un teléfono móvil, impuestos incluidos. Este servicio para adultos reservado a mayores de años está prestado por JESUS ESCRIBA.

** El uso de nuestros servicios personalizados de Secretaría (644199883, citas@dormirbien.info) puede asociar incrementos de hasta el 15% sobre las tarifas publicadas en nuestra web, por Skype y a través de otros canales promocionale